

HAKEN

CÂN ĐO SỨC KHỎE THÔNG MINH

Model: HK-CD09

Thời gian ra hàng: T01.2024

NỘI DUNG

- 1 **Tổng thể về sản phẩm**
Hình ảnh, cấu tạo
- 2 **Thông tin kỹ thuật**
Thông số cụ thể, chi tiết
- 3 **Đặc điểm sản phẩm**
Ưu việt của sản phẩm
- 4 **Bao bì nhãn mác**
Tổng thể nhận diện sản phẩm

01

Tổng thể về sản phẩm



Mô tả chung

HAKEN

Cân đo sức khỏe thông minh HAKEN sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học BIA - Phương pháp đo lường sức khỏe tiên tiến và chính xác nhất thế giới, đo được **29 chỉ số sức khỏe**: Nhịp tim, cân nặng, BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể, mỡ nội tạng, mỡ dưới da, tỷ lệ cơ bắp, trọng lượng không bao gồm xương, nước cơ thể, cơ xương, khối lượng xương, khối lượng cơ, đậm, BMR, độ tuổi cơ thể, WHR, Protein, khối lượng chất béo, hàm lượng nước, trọng lượng cơ thể lý tưởng, Mức độ béo phì, Kiểu cơ thể.....Cung cấp cho bạn một nguồn dữ liệu chính xác, giúp bạn hiểu rõ về cơ thể của mình



● Hình ảnh sản phẩm

HAKEN



02

Thông tin kỹ thuật



● Bảng thông số kỹ thuật

HAKEN

Đặc điểm	Chi tiết
Mã hàng	HK-CD09
Kích thước sp	310*355*50mm
Hiển thị	Màn hình hiển thị LED VA
Đo lường chỉ số	29 chỉ số cơ thể
Pin	Lithium 300mah
Quy cách	5c/kiện
Thời gian bảo hành	12 tháng
Giá catalogue	2.800.000 vnđ



03

Đặc điểm sản phẩm






Cân nặng của cơ thể là phương pháp để xác định một người có bị thừa hay thiếu cân




Tỷ lệ chất béo trong cơ thể là thước đo để xác định xem một người có bị thừa hay thiếu cân không

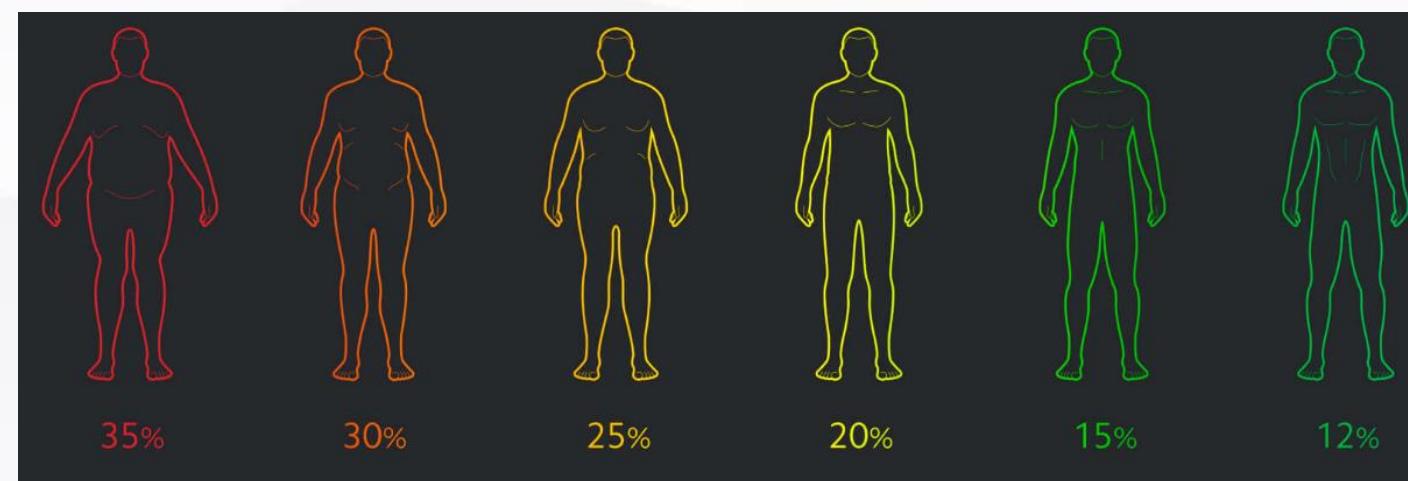

Phân tích trở kháng điện sinh học BIA

Phương pháp phân tích cơ thể khoa học và chính xác nhất thế giới, phân tích chỉ số cơ thể qua 8 điện cực ở 2 bàn chân và 2 bàn tay

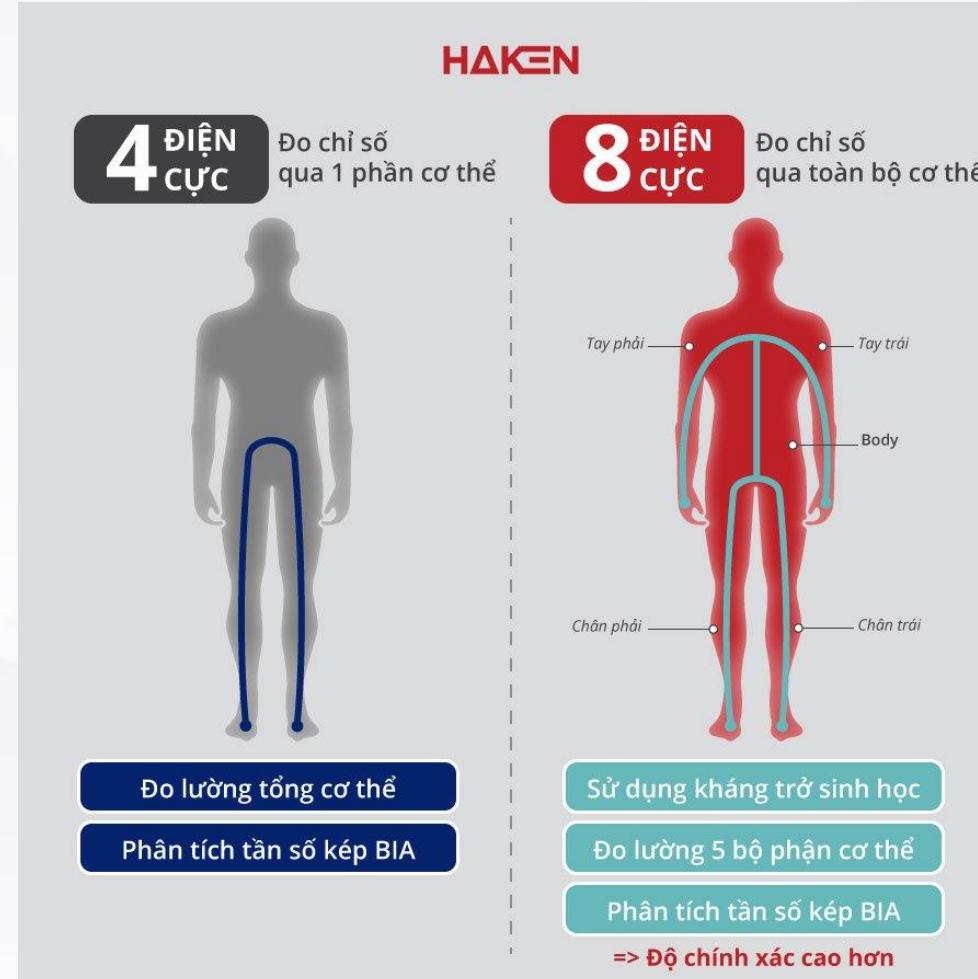

Đo lường 29 chỉ số cơ thể

Nhờ tính dẫn điện cao của cơ, mạch máu và xương (do hàm lượng nước cao) và độ dẫn điện thấp của mỡ trong cơ thể, thiết bị sử dụng phương pháp phân tích trở kháng điện sinh học BIA dẫn một dòng điện rất yếu và cực kì an toàn qua cơ thể của bạn để xác định số lượng mô mỡ, cơ, xương..., sau đó tính toán và xác định tỷ lệ % các thành phần trong cơ thể.



KẾT NỐI DỮ LIỆU QUA APP FITDAYS

Kết nối thông minh qua app FITDAYS, vô cùng đơn giản, dễ sử dụng với tất cả mọi người. Thông qua app FITDAYS để theo dõi sự biến đổi cơ thể của mình theo từng ngày, từng tuần, từng tháng... Từ đó, giúp bạn có dữ liệu để xây dựng một chế độ sống lành mạnh, cân bằng và khoa học nhất.

Hỗ trợ đo lường sức khỏe và theo dõi cho nhiều người cùng một lúc và cảnh báo khi có sự thay đổi lớn về cơ thể/người dùng



MÀN HÌNH HIỂN THỊ VA

Màn hình hiển thị chỉ số cơ thể kích thước lớn, đa sắc, đẹp mắt, trực quan dễ nhìn



CẤU TRÚC HOÀN HẢO, CHẮC CHẮN

Cảm biến trọng lượng bằng thép mangan hình chữ G có thể cảm nhận sự thay đổi về cân nặng nhỏ đến 50g, giúp cho kết quả đo của Cân đo sức khỏe HAKEN chính xác hơn. Cân cũng hỗ trợ chuyển đổi giữa đơn vị kilogram và pound để dễ đọc.

Cấu trúc sản phẩm chắc chắn, chống trơn trượt, mặt kính cường lực chất lượng cao với độ dày lên tới 6mm, chịu tải 180kg

HAKEN

THIẾT BỊ THÔNG MINH - HOÀN HẢO



CỔNG SẠC TYPE C TIỆN LỢI

Sản phẩm trang bị chức năng bảo vệ quá sạc, đi kèm dây sạc type C dài 1m



XUẤT BÁO CÁO DỮ LIỆU CƠ THỂ

Có thể xuất dữ liệu các chỉ số cơ thể và kết nối máy in để in thành bản cứng



04

Bao bì nhän mác



● Bao bì nhãn mác

HAKEN



Vỏ kiện

Vỏ kiện màu nâu vàng, in hiệu HAKEN

Dán tem bảo hành điện tử



Vỏ hộp

Vỏ hộp in màu đỏ, in hiệu HAKEN

Dán tem bảo hành điện tử



HDSD

Hướng dẫn sử dụng




Tem nhãn

Tem thông số sản phẩm, tem bảo

hành điện tử

Hướng dẫn sử dụng tem Bảo hành điện tử

HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

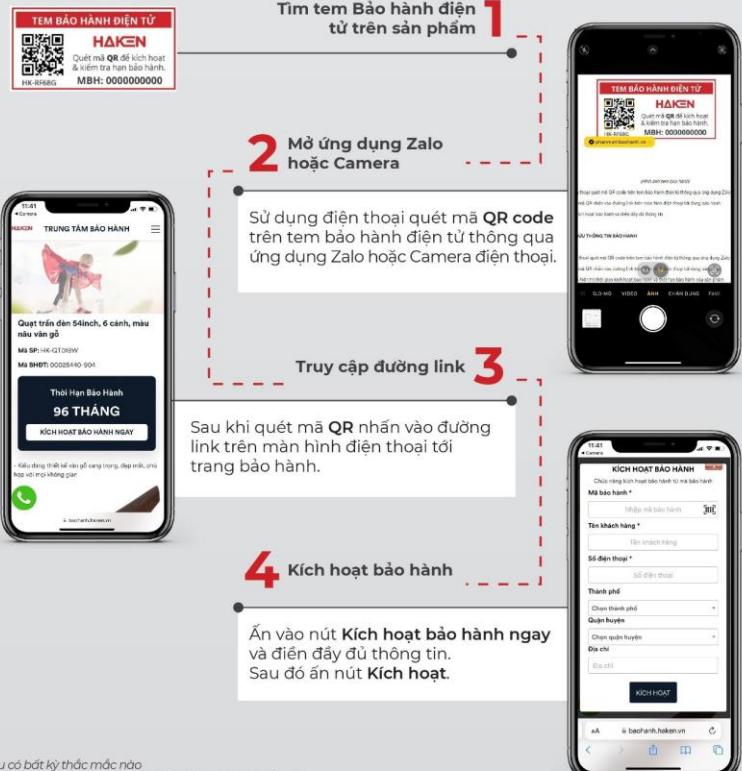

*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ số Hotline: (024)2242-2626 để được hỗ trợ!

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN BẢO HÀNH

CÁCH 1


- Mở ứng dụng Zalo hoặc Camera
- Sử dụng điện thoại quét mã QR code trên tem bảo hành điện tử thông qua ứng dụng Zalo hoặc Camera điện thoại.
- Truy cập đường link
- Sau khi quét mã QR nhấn vào đường link trên màn hình điện thoại tới trang bảo hành.

CÁCH 2

- Truy cập website bảo hành
- Truy cập baohanh.haken.vn rồi chọn mục Bảo hành. Sau đó chọn mục Tra cứu hàn bảo hành.

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU BẢO HÀNH SỬA CHỮA

1 Thực hiện các bước như tra cứu bảo hành

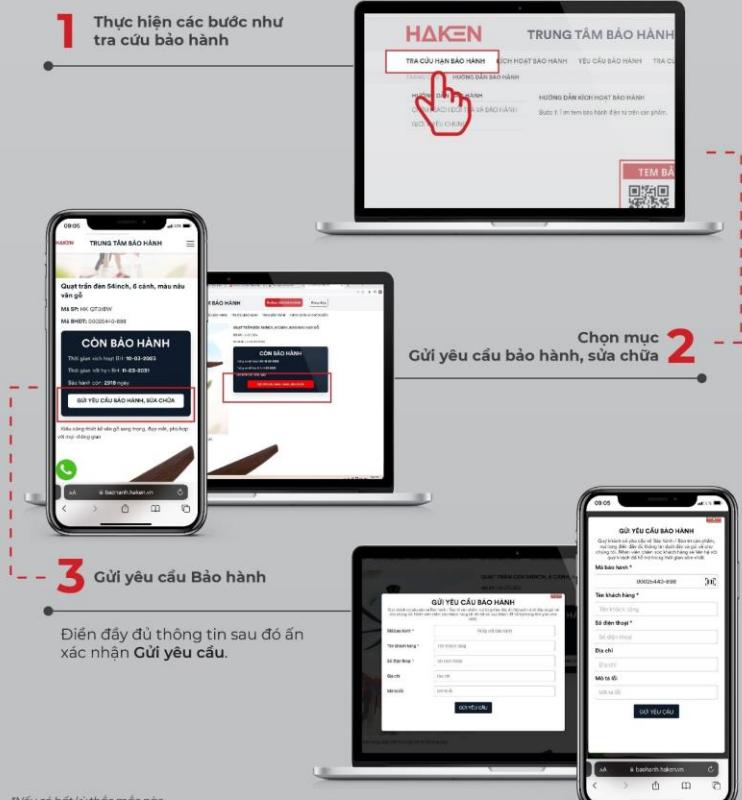

2 Chọn mục

3 Gửi yêu cầu Bảo hành

Điền đầy đủ thông tin sau đó ấn xác nhận Gửi yêu cầu.

*Nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ số Hotline: (024)2242-2626 để được hỗ trợ!



Công ty cổ phần ADLUX VIỆT NAM

MST: 0107559633 – Hotline: 0968 986 158

VPGD: C2 ngõ 252 Lương Thé Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội